

●正しくお使いいただくために、ご利用前に必ず取扱説明書をお読みください。

このスパーサーは洋式トイレ用フレームSUS-はねあげR-2専用です。

この製品は、洋式トイレ用フレームSUS-はねあげR-2の幅を約5cm広げることが出来ます。  
温水洗浄機能付トイレの操作部を避けて、洋式トイレ用フレームと設置する際にお使いください。  
なお、それ以外の目的では使用しないでください。この「取扱説明書」は、読み終わった後も洋式トイレ用フレームSUS-はねあげR-2の「取扱説明書」と一緒にして、いつでも見られる場所に保管してください。

## 安全上のご注意 (必ずお守りください)

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



### 警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

#### 使用前のご注意 (設置後と使用前に必ず点検してください。)

必ず実行すること

スパーサーを本体へ取り付け、ネジをしめ付けるときは、切欠きの奥まで確実にネジがはまっていることをご確認ください。

その後、工具を使って確実にしめ付けてください。  
製品の転倒や破損の原因になります。



#### 設置上と使用中のご注意

絶対にしないこと

左側支柱には取り付けないでください。このスパーサーは洋式トイレ用フレームSUS-はねあげR-2の右側支柱専用(左シールのない方の支柱)のスパーサーです。  
製品の破損や転倒の原因になります。

スパーサーカバーの上に乗ったり、物を置かないでください。  
製品の破損や転倒の原因になります。




### 注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

#### 設置上のご注意

必ず実行すること

設置する際は、トイレ室内の住宅構造物もしくはトイレ備品に当たらない様に取り付けてください。  
製品や住宅構造物もしくはトイレ備品を破損させる原因になります。

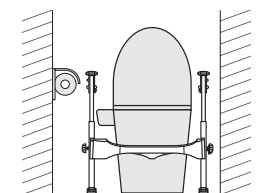

必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。



してはいけない「禁止」内容を説明しています。

## 仕様

品名	洋式トイレ用フレーム SUS-はねあげR-2 専用スパーサー		
構成 部材	部品名	材質	個数
	専用スパーサー	ステンレス	1
	専用スパーサーカバー	ポリプロピレン	1
	接続ナット	ステンレス	2
	金属ワッシャー	ステンレス	2
	樹脂ワッシャー	ポリカーボネート	2



#### 廃棄上の注意

お住まいの地域の分別ルールに従って廃棄してください。




接続ナット



金属ワッシャー



樹脂ワッシャー

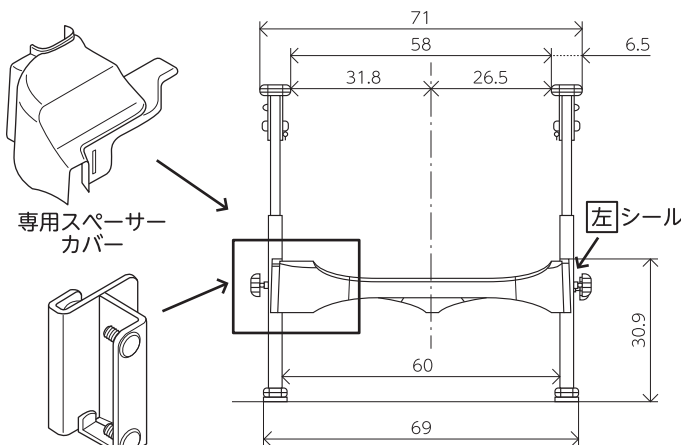

正面図

(単位: cm)

## 取り付けかた



準備するもの  
スパナ(13mm)



- ①本体が組み立てられた状態の場合は、必ずナット、ワッシャー類を外してください。本体の右側支柱（左シールのない方の支柱）のネジヘスパーの切欠きを引っかけてください。



**このスパーは、右側支柱専用のスパーです。**

左側支柱には取り付けないでください。製品の破損や転倒の原因になります。


- ②続いて、連結バーの切欠きをスパーのボルトへ引っかけてください。



スパーと支柱はまだ完全に固定されていないので、スパーの落下に注意してください。

- ③樹脂ワッシャー、金属ワッシャーの順にそれぞれボルトへはめ、接続ナットをスパナでしっかりしめ付けてください。（4ヶ所）

- ④スパーカバーを取り付けてください。

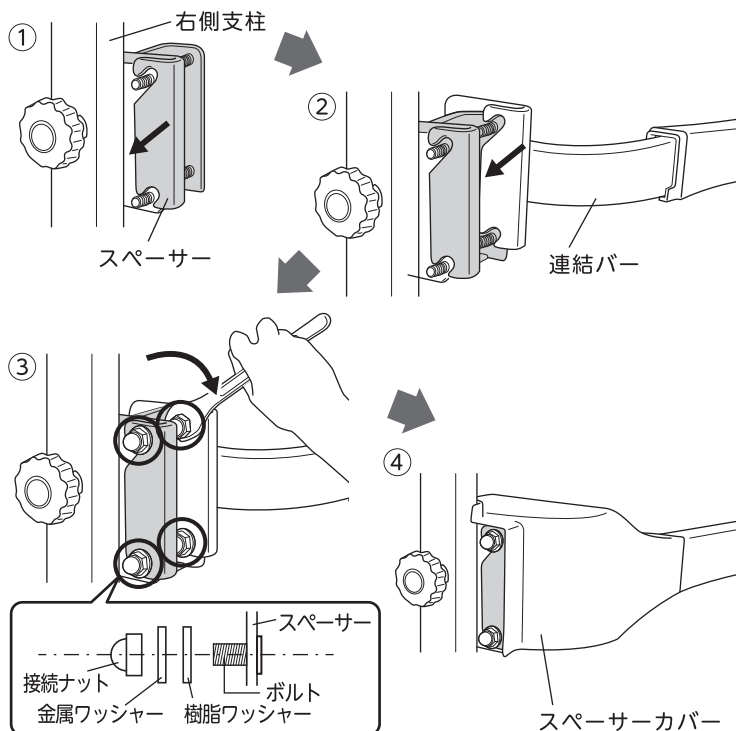

## お手入れの方法

### いつものお手入れは

いつまでも気持ちよくお使いいただくために、こまめに汚れを落としてください。汚れはスポンジか柔らかい布に、中性洗剤をふくませて拭きとってください。




#### ●次にあげるものではお手入れしないこと

- |            |                  |
|------------|------------------|
| ・塩素系洗剤     | ・タワシ             |
| ・酸、アルカリ性洗剤 | ・研磨剤入りのスポンジ      |
| ・シンナー      | ・磨き粉             |
| ・クレゾール     | ・塩素系薬剤をかけての殺菌、消毒 |
| ・熱湯（煮沸消毒等） | ・その他製品を傷付けるもの    |

製品が劣化し、けがの原因になります。

#### ●直射日光による天日干しは行わないこと

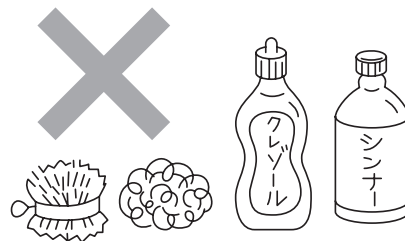

### 消毒方法

消毒は納入業者、または消毒施設のある業者に依頼してください。製品の消毒は、アルコール清拭消毒、逆性石けん清拭消毒などを推奨します。製品に使用している素材の物性を考慮した消毒方法を選択してください。



#### オゾンガス、ホルムアルデヒドガスは使用しないこと

製品が破損する原因になります。

- 製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。

製品に関するご意見・お問い合わせは

### お客様相談室

フリーダイヤル ☎0120-86-7735

（受付時間）祝祭日以外の月～金 9:00～17:00  
（12:00～13:00はのぞく）

製造・発売元



## アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

URL <http://www.aronkasei.co.jp/> 安寿

検索